




SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS

IrriFlex[®]

Quick User Guide

Aguja de irrigación del conducto radicular flexible
de 30G y de un solo uso con 2 orificios laterales

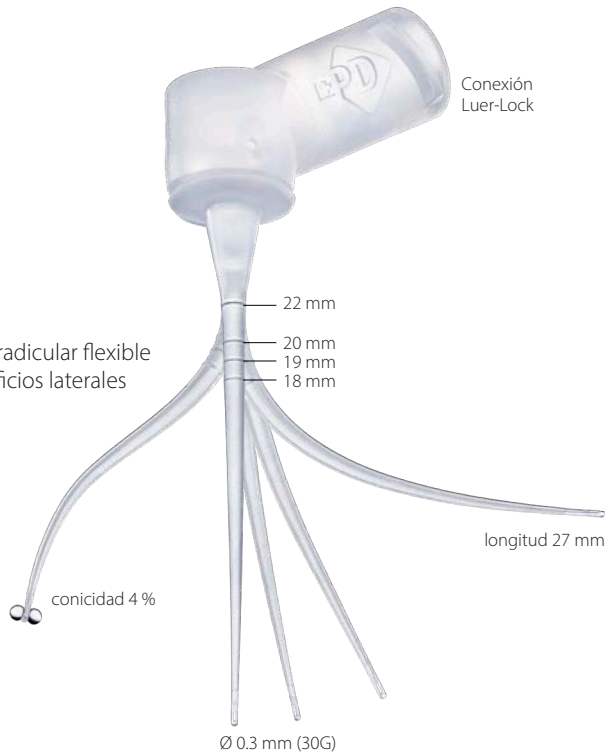


Instrucciones de configuración



1. Abra el envase tirando de la muesca precortada prevista para ello.
2. Previamente, llene la jeringa con conexión Luer-Lock con uno de los líquidos compatibles: NaOCI estabilizado hasta al 6 % (calentado), EDTA al 17 %, digluconato de clorhexidina al 2 %, ácido cítrico hasta al 40 %, agua destilada.



Nota: Dual Rinse® HEDP también es una solución compatible.

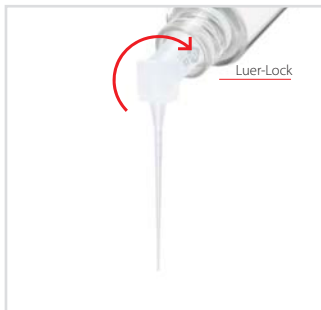

3. Inserte el conector de la aguja en el extremo de la jeringa Luer-Lock previamente llenada y fije la aguja haciéndola girar hacia la derecha.



Nota: Asegúrese de que la aguja esté correctamente fijada a la jeringa.



4. Identifique las 4 marcas de profundidad de la aguja (18 mm, 19 mm, 20 mm y 22 mm) para respetar la longitud de trabajo.



Nota: Se puede utilizar un tope como indicador de la longitud de trabajo.

Primer uso: Antes de usar, compruebe que el cilindro de la jeringa tiene la presión necesaria para crear dos chorros de salida de la aguja equilibrados. Este paso también le permite controlar la fluidez de la solución de irrigación.

Irrigación



Nota: Si es necesario, doble previamente la punta para facilitar el acceso al canal.



5. Inicie la irrigación en la cámara pulpar e introduzca suavemente la aguja en el orificio del canal.



Nota: Evite golpear la base de la cámara pulpar con la punta de la aguja para evitar daños en los orificios laterales.



6. La punta de la aguja se desliza fácilmente en el canal. Asegúrese de respetar la longitud de trabajo.



Nota: Asegúrese también de que la aguja puede moverse libremente para garantizar un flujo constante de solución de irrigación.



SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS

Referencias del producto

	Ref.	Precio de venta sugerido
CAJA DE 20 PIEZAS	21400	37.80 CHF €
CAJA DE 40 PIEZAS	21401	63.00 CHF €



pd-irriflex.com

Esta Guía Rápida del Usuario es una versión simplificada de las Instrucciones de Uso (IFU) con el objetivo de resaltar y resumir los puntos clave de uso. Por favor, siempre consulte las IFU oficiales proporcionadas con los productos físicos o en el sitio web. Solo las IFU son autoritativas.

 Rue des Bosquets 18
1800 Vevey
Switzerland

 **Produits Dentaires SA**
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey . Switzerland

 +41 21 921 26 31
 info@pd-dental.com

 1639

