




SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS

IrriFlex®

Quick User Guide

Aguja de irrigación del conducto radicular flexible
de 30G y de un solo uso con 2 orificios laterales

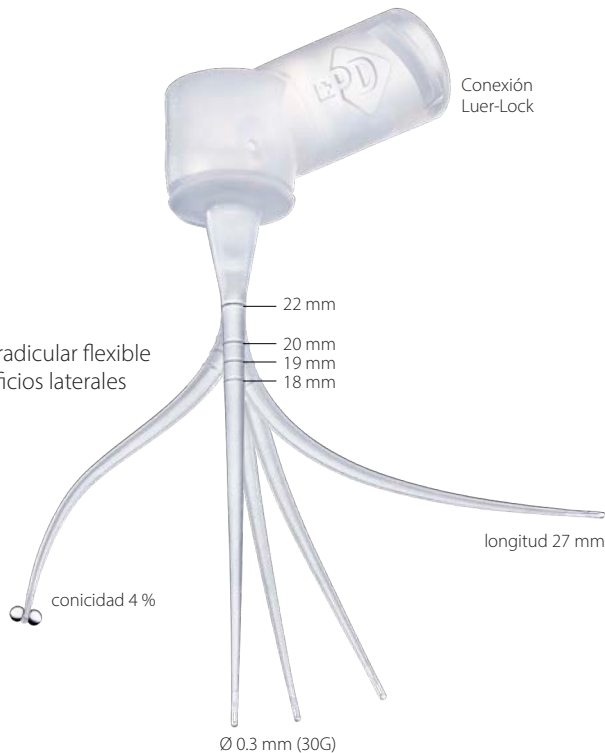


Instrucciones de configuración



1. Abra el envase tirando de la muesca precortada prevista para ello.
2. Previamente, llene la jeringa con conexión Luer-Lock con uno de los líquidos compatibles: NaOCl estabilizado hasta al 6 % (calentado), EDTA al 17 %, digluconato de clorhexidina al 2 %, ácido cítrico hasta al 40 %, agua destilada.



Nota: Dual Rinse® HEDP también es una solución compatible.

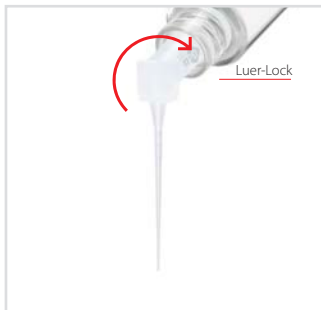

3. Inserte el conector de la aguja en el extremo de la jeringa Luer-Lock previamente llenada y fije la aguja haciéndola girar hacia la derecha.



Nota: Asegúrese de que la aguja esté correctamente fijada a la jeringa.



4. Identifique las 4 marcas de profundidad de la aguja (18 mm, 19 mm, 20 mm y 22 mm) para respetar la longitud de trabajo.



Nota: Se puede utilizar un tope como indicador de la longitud de trabajo.

Primer uso: Antes de usar, compruebe que el cilindro de la jeringa tiene la presión necesaria para crear dos chorros de salida de la aguja equilibrados. Este paso también le permite controlar la fluidez de la solución de irrigación.

Irrigación



 **Nota:** Si es necesario, doble previamente la punta para facilitar el acceso al canal.



5. Inicie la irrigación en la cámara pulpar e introduzca suavemente la aguja en el orificio del canal.

 **Nota:** Evite golpear la base de la cámara pulpar con la punta de la aguja para evitar daños en los orificios laterales.



6. La punta de la aguja se desliza fácilmente en el canal. Asegúrese de respetar la longitud de trabajo.

 **Nota:** Asegúrese también de que la aguja puede moverse libremente para garantizar un flujo constante de solución de irrigación.



**SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS**

Referencias del producto

	Ref.	Precio de venta sugerido
CAJA DE 20 PIEZAS	21400	CHF 36.00 / EUR 33.35
CAJA DE 40 PIEZAS	21401	CHF 60.00 / EUR 55.55



pd-irriflex.com



Rue des Bosquets 18
1800 Vevey
Switzerland



+41 21 921 26 31



info@pd-dental.com



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey . Switzerland



1639