




SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS

IrriFlex®

Quick User Guide

Aiguille d'irrigation canalaire flexible 30G
à usage unique avec 2 événements latéraux

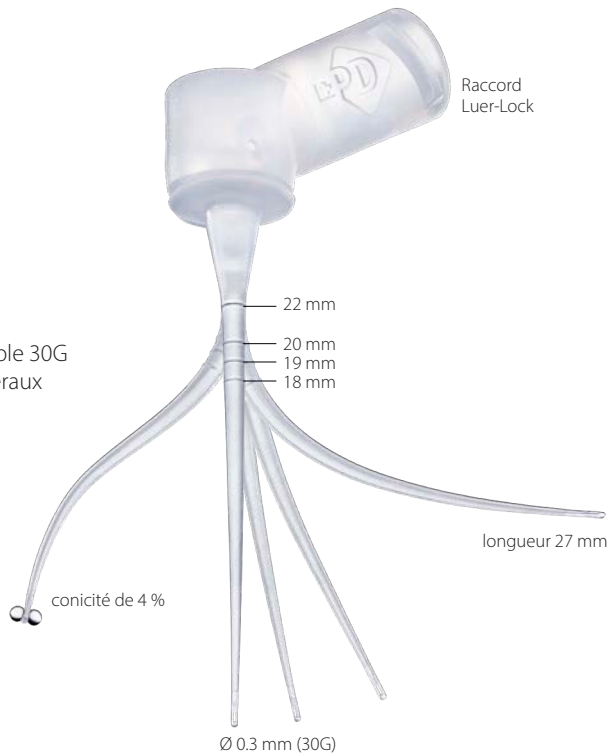


Instructions de réglage



1. Ouvrir l'emballage en tirant sur l'encoche prédécoupée prévue à cet effet.
2. Remplir votre seringue Luer-Lock avec l'un des liquides compatibles : NaClO stabilisé jusqu'à 6 % (chauffé), EDTA 17 %, digluconate de chlorhexidine 2 %, acide citrique jusqu'à 40 %, eau distillée.



Remarque: Dual Rinse® HEDP est également une solution compatible.

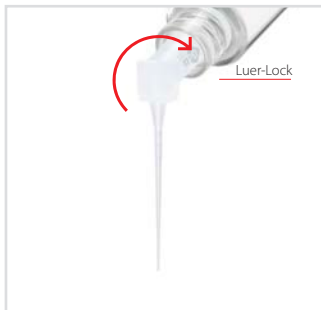

3. Insérer la partie connecteur de l'aiguille dans la seringue Luer-Lock préalablement remplie et verrouiller l'aiguille en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



Remarque: S'assurer que l'aiguille est correctement verrouillée sur la seringue.



4. Identifier les 4 repères de profondeur sur l'aiguille (18 mm, 19 mm, 20 mm et 22 mm) pour respecter votre longueur de fonctionnement.



Remarque: Un stopper peut être utilisé pour indiquer la longueur de travail.

Première utilisation: Avant l'utilisation, vérifier la pression à exercer sur le piston de la seringue pour créer deux jets équilibrés. Cette étape vous permet également de contrôler la fluidité de votre solution d'irrigation.

Irrigation




 **Remarque:** Si nécessaire, courber au préalable la pointe pour accéder plus facilement au canal.



5. Commencer l'irrigation dans la chambre pulpaire et insérer doucement l'aiguille dans l'orifice du canal.

 **Remarque:** Éviter de toucher le fond de la chambre pulpaire avec la pointe de l'aiguille afin d'éviter d'endommager les événements latéraux.

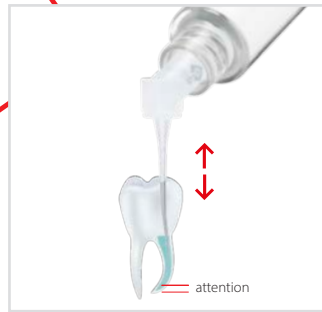

6. Éviter de toucher le fond de la chambre pulpaire avec la pointe de l'aiguille afin d'éviter d'endommager les événements latéraux.

 **Remarque:** S'assurer également que l'aiguille peut bouger librement pour garantir un retour constant du liquide d'irrigation.




**SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS**

Références des produits

	Ref.	Prix au détail suggéré
BOÎTE DE 20 PIÈCES	21400	CHF 36.00 / EUR 33.35
BOÎTE DE 40 PIÈCES	21401	CHF 60.00 / EUR 55.55



pd-irriflex.com

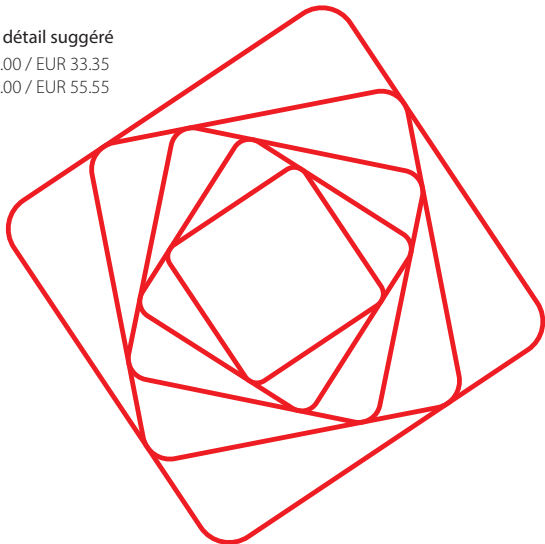

Rue des Bosquets 18
1800 Vevey
Switzerland



+41 21 921 26 31



info@pd-dental.com



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey . Switzerland



1639